

Comment utiliser votre Symbicort® Turbuhaler®

1



Dévissez et enlevez le couvercle. Il se peut que vous entendiez un léger bruit — c'est normal.

2




Tenez l'inhalateur à la verticale par la partie centrale, et non par l'embout buccal.

Tournez la molette rouge le plus loin possible dans une direction, puis le plus loin possible dans la direction opposée. La direction dans laquelle vous tournez la molette en premier lieu n'a aucune importance. À un certain moment, vous entendrez un déclic. La dose de médicament est maintenant chargée dans votre inhalateur.


REMARQUE : Si vous utilisez un inhalateur tout droit sorti de l'emballage pour la toute première fois, vous devrez répéter cette étape deux autres fois. Vous ne devez préparer votre nouvel inhalateur que la première fois que vous l'utilisez.

3

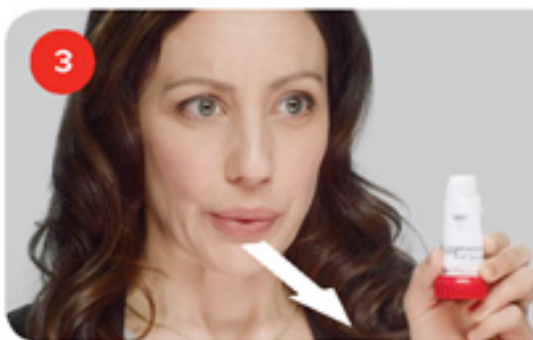

Expirez en gardant la bouche éloignée de l'embout buccal. Ensuite, placez doucement l'embout buccal entre les dents et refermez les lèvres autour de ce dernier.

4

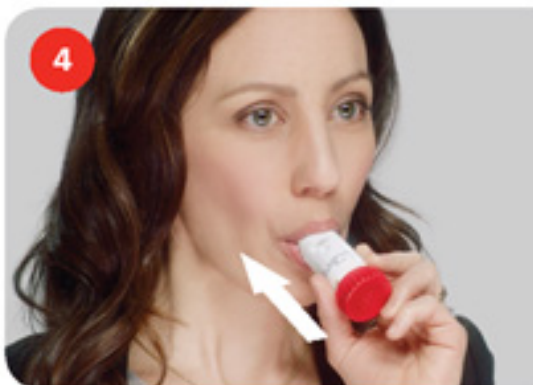

Inhalez aussi vivement et profondément que vous le pouvez. Avant d'expirer, retirez l'inhalateur Symbicort® Turbuhaler® de votre bouche.

Répétez ce processus à partir de l'étape 2, si vous devez prendre plus d'une dose.

Après avoir pris le nombre de doses prescrites par votre médecin, revissez le couvercle sur l'inhalateur et rincez-vous la bouche avec de l'eau (sans l'avaler).

FAQ sur Symbicort® Turbuhaler®

Qu'arrive-t-il si je tourne la molette trop de fois?

Ne vous en faites pas si, par inadvertance, vous tournez la molette trop de fois — vous ne chargerez pas plusieurs doses. Symbicort® Turbuhaler® est conçu de sorte à ne charger qu'une seule dose à la fois.

Qu'est-ce qui cause le cliquetis?

Le léger bruit est dû à l'agent dessiccant, et non au médicament.

Qu'arrive-t-il si j'échappe l'inhalateur?

Si, par mégarde, vous échappez ou agitez l'inhalateur Symbicort® Turbuhaler®, ou vous expirez dedans après avoir chargé une dose, cette dose sera perdue. Dans ce cas, chargez tout simplement une nouvelle dose.

Est-ce que je dois tourner l'embout buccal?

N'essayez pas d'enlever l'embout buccal ou de le faire tourner inutilement; il est fixé à l'inhalateur et ne doit pas être retiré.

Est-ce que je suis supposé goûter le médicament?

Même si vous suivez les instructions à la lettre, il se peut que vous ne sentiez pas le médicament passer ou qu'il ne goûte rien; cela est courant.

Comment dois-je interpréter ce qui s'affiche sur l'indicateur de doses de l'inhalateur Symbicort® Turbuhaler®?

L'inhalateur Symbicort® Turbuhaler® est muni d'une petite fenêtre qui vous indique le nombre de doses restantes. L'indicateur de doses bouge lentement chaque fois que vous chargez une dose.



Chaque 20^e dose est indiquée par un nombre.

Chaque 10^e dose est indiquée par un tiret.

Quand le chiffre « 0 » sur fond rouge atteint le milieu de la fenêtre repère, il est temps de jeter l'inhalateur.



Visitez le site [Symbicort.ca](https://www.symbicort.ca) pour visionner la vidéo sur le mode d'emploi de Symbicort® Turbuhaler®.

Offerte en français, en anglais, en italien, en espagnol, en arabe, en persan, en pendjabi, en tamoul, en urdu, en cantonais, en mandarin et en tagalog.